

wellbox®   
SLIMMING & ANTI-AGING

PROGRAMMI  
**VISO E CORPO**



[www.wellbox.com](http://www.wellbox.com)

## PROGRAMMI VISO

ISTRUZIONI PER IL VISO P3

### AZIONE LUMINOSITA'

PROGRAMMA LUMINOSITA' P4

### AZIONE ANTI-ETA'

PROGRAMMA CONTORNO OCCHI P5

PROGRAMMA ANTI-RUGHE FRONTE P6

PROGRAMMA CONTORNO LABBRA P7

PROGRAMMA ANTI-ETA' COLLO P8

PROGRAMMA ANTI-ETA' DECOLLETE P9

PROGRAMMA ANTI-ETA' MANI P10

PROGRAMMA ANTI-ETA' VISO P11

### AZIONE RASSODAMENTO

PROGRAMMA RASSODAMENTO VISO P12

### AZIONE DETOX

PROGRAMMA FRESCHEZZA OCCHI P13

PROGRAMMA DETOX P14


### AZIONE SNELLENTI

PROGRAMMA RIMODELLANTE VISO P15



*Si prega di leggere attentamente il manuale  
prima di utilizzare la Wellbox [S]*

## > ISTRUZIONI PER IL VISO

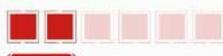

La potenza di aspirazione deve essere regolata a seconda della sensazione e della qualità della pelle. Fare attenzione a non aumentare troppo sulla pelle sottile e matura.



Questi due pittogrammi sono previsti solo a scopo informativo. Essi vi guideranno attraverso i programmi e indicheranno quali testinedi trattamento utilizzare in base alla sequenza di aspirazione selezionata.



La sequenza di aspirazione rappresenta il numero di aspirazioni al secondo. Più alta è la frequenza più vicina alla superficie della pelle sarà l'azione; rassodamento o luminosità.

Al contrario, una sequenza di aspirazione più bassa avrà un'azione più in profondità, ideale per riempire le rughe.



Per una migliore presa sui tessuti, muovere la testina LIFT tracciando una linea tratteggiata (con piccoli salti, fermandosi 2-3 secondi su ciascun punto) rispettando la direzione indicata dalla freccia bianca.



Le linee rosse indicano come posizionare le alette quando si muove la testina di trattamento. Essi devono sempre essere perpendicolari alla ruga.



I cosmetici Endermologie® aiutano a potenziare l'azione della Wellbox® [S]. Una volta stimolato, la pelle diventa più ricettiva ai principi attivi contenuti nei prodotti cosmetici.

## AZIONE LUMINOSITA'

> IL MIO PROGRAMMA LUMINOSITA' **6 min**



**PASSO 1:** Pulire e preparare la pelle con la Lozione Micellare Pre-Trattamento, che lenisce e fornisce la massima idratazione alla pelle.



## PASSO 2: CURA LUMINOSITA'



2:00



2:00



2:00

P4

**PASSO 3:** Il Total Eye Care leviga borse, rughe e occhiaie dalla zona del contorno occhi, i miei occhi sono immediatamente più freschi.



**PASSO 4:** Il Radiance Brightening Serum, arricchito con vitamina C e l'esclusivo LPG<sup>®</sup> Anti-Aging Complex, illumina e uniforma la pelle. Può anche diminuire le macchie di pigmentazione.



**PASSO 5:** Infine applico il Complete Correction Fluid SPF15 per un effetto sano e luminoso istantaneo. Leggermente colorato, questo fluido può levigare le imperfezioni della pelle. Il suo fattore solare (SPF 15) impedisce i segni di invecchiamento proteggendo dall'esposizione quotidiana.




**AZIONE ANTI-ETA'**

**> IL MIO TRATTAMENTI OCCHI RIPOSATI 6 min**



**PASSO 1:** La lozione micellare Pre-Care dovrebbe essere usato come un detergente per rimuovere il make-up prima di ogni trattamento Wellbox® [S]. Lenisce la pelle e offre la massima idratazione.



**PASSO 2: PROGRAMMA OCCHI RIPOSATI**

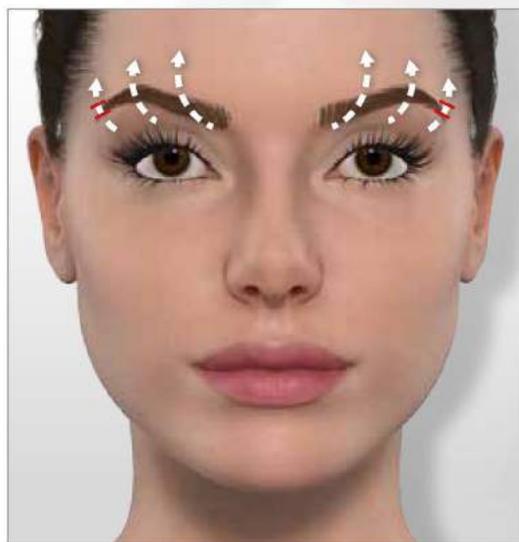

**P5**

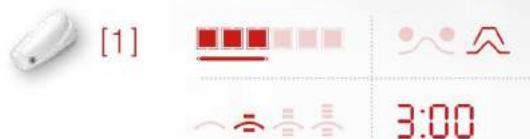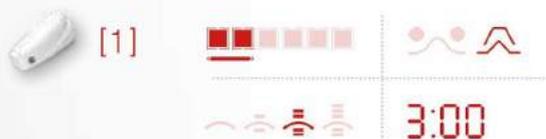

**PASSO 3:** Il Total Eye Care leviga borse, rughe e attenua le occhiaie scure del contorno occhi, i miei occhi sono immediatamente più freschi.



**AZIONE ANTI-ETA'**

**> PROGRAMMA ANTI-ETA' FRONTE**

**6 min**


**PASSO 1:** pulire e preparare la pelle con il Pre-Care Micellar Lotion, che lenisce e fornisce la massima idratazione alla pelle.



**PASSO 2: TRATTAMENTO ANTI-ETA' FRONTE**



4:00

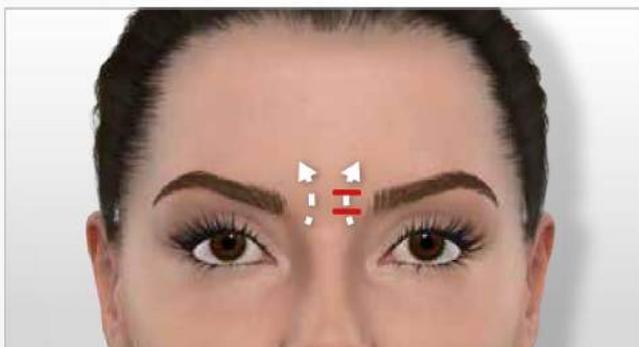


2:00

**P6**

**PASSO 3:** Il Radiance Brightening Serum, arricchito con vitamina C e l'esclusivo Complesso LPG® Anti-Aging, illumina e uniforma la mia pelle. E' anche possibile diminuire le macchie di pigmentazione.



**PASSO 4:** Grazie al suo esclusivo LPG® Anti-aging Complex a base di acido ialuronico, la Crema Rassodante Replenishing dona volume, leviga e ridensifica la pelle.

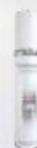

**AZIONE ANTI-ETA'**


**> PROGRAMMA CONTORNO LABBRA**

**6 min**


**PASSO 1:** La lozione micellare Pre-Care dovrebbe essere usato come un detergente per rimuovere il make-up prima di ogni trattamento Wellbox<sup>®</sup> [S]. Lenisce la pelle e offre la massima idratazione.



**PASSO 2: TRATTAMENTO CONTORNO LABBRA**

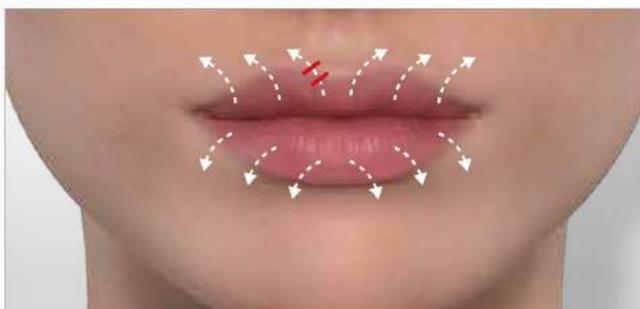

2:00

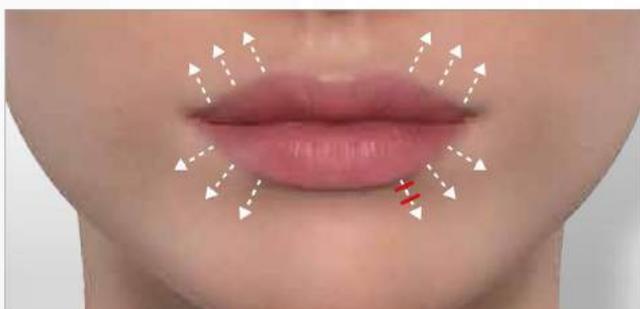

2:00



2:00

**P7**

**PASSO 3:** Grazie al suo esclusivo LPG<sup>®</sup> Anti-aging Complex a base di acido ialuronico, la Crema Rassodante Replenishing dona volume, leviga e ridensifica la pelle.





**AZIONE ANTI-ETA'**

**> TRATTAMENTO ANTI-ETA' COLLO 6 min**



**PASSO 1:** pulire e preparare la pelle con il Pre-Care Micellar Lotion, che lenisce e fornisce la massima idratazione alla pelle.



**PASSO 2: PROGRAMMA ANTI-ETA' COLLO**

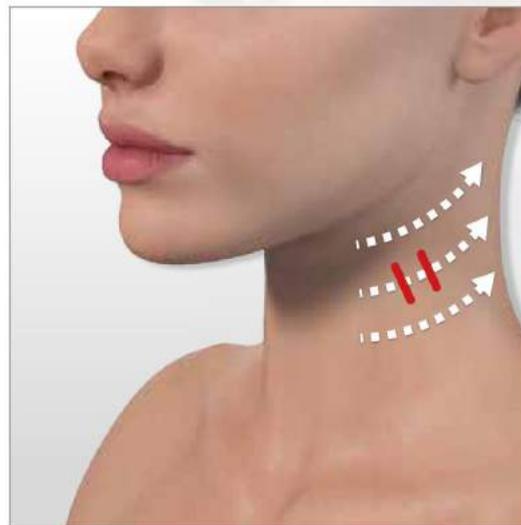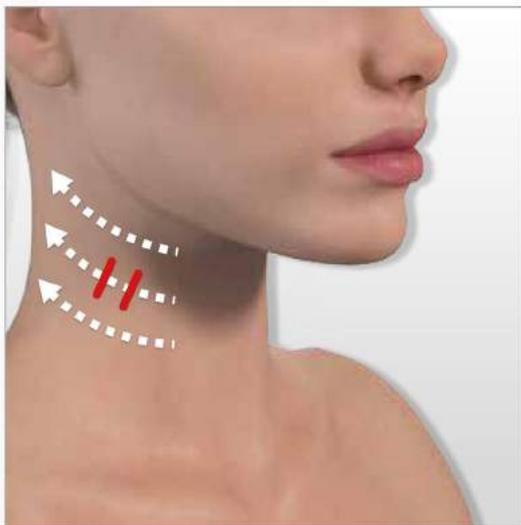

**P8**

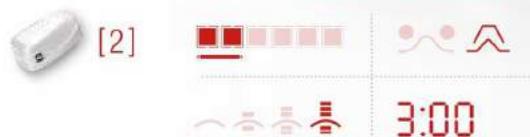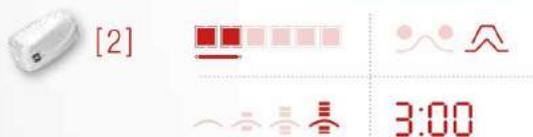

**PASSO 3:** Il Radiance Brightening Serum, arricchito con vitamina C e l'esclusivo Complesso LPG® Anti-Aging, illumina e uniforma la mia pelle. E' anche possibile diminuire le macchie di pigmentazione.



**PASSO 4:** Grazie al suo esclusivo LPG® Anti-aging Complex a base di acido ialuronico, la Crema Rassodante Replenishing dona volume, leviga e ridensifica la pelle.




**AZIONE ANTI-ETA'**

**> PROGRAMMA ANTI-ETA' DÉCOLLETÉ 6 min**


**PASSO 1:** pulire e preparare la pelle con il Pre-Care Micellar Lotion, che lenisce e fornisce la massima idratazione alla pelle.



**PASSO 2: TRATTAMENTO ANTI-ETA' DÉCOLLETÉ**

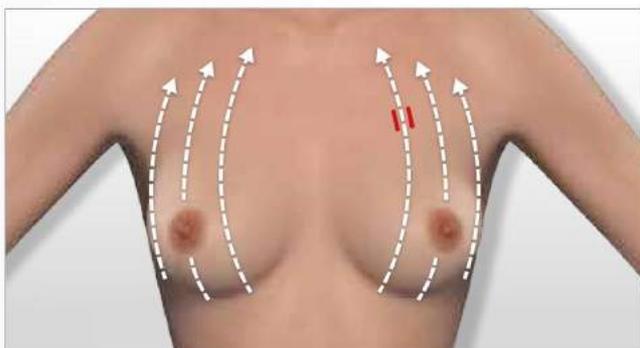

4:00

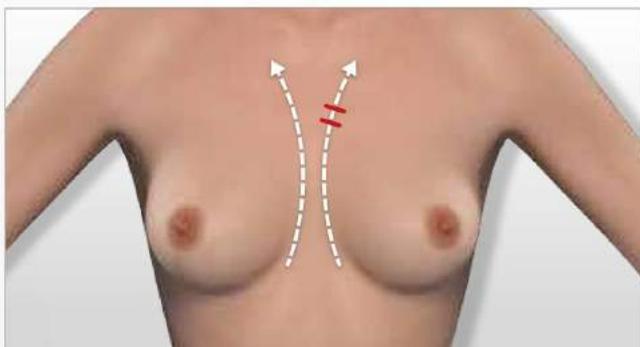

2:00

P9

**PASSO 3:** Il Radiance Brightening Serum, arricchito con vitamina C e l'esclusivo Complesso LPG<sup>®</sup> Anti-Aging, illumina e uniforma la mia pelle. E' anche possibile diminuire le macchie di pigmentazione.



**PASSO 4:** Grazie al suo esclusivo LPG<sup>®</sup> Anti-aging Complex a base di acido ialuronico, la Crema Rassodante Replenishing dona volume, leviga e ridensifica la pelle.



**AZIONE ANTI-ETA'**

**> TRATTAMENTO ANTI-ETA' MANI 6 min**

**PASSO 1:** pulire e preparare la pelle con il Pre-Care Micellar Lotion, che lenisce e fornisce la massima idratazione alla pelle.



**PASSO 2: PROGRAMMA ANTI-ETA' MANI**



3:00



3:00

**P 10**

**PASSO 3:** Il Radiance Brightening Serum, arricchito con vitamina C e l'esclusivo Complesso LPG<sup>®</sup> Anti-Aging, illumina e uniforma la mia pelle. E' anche possibile diminuire le macchie di pigmentazione.



**PASSO 4:** Grazie al suo esclusivo LPG<sup>®</sup> Anti-aging Complex a base di acido ialuronico, la Crema Rassodante Replenishing dona volume, leviga e ridensifica la pelle.



**AZIONE ANTI-ETA'**

**> PROGRAMMA ANTI-ETA' VISO**

**12 min**



**GUARDA IL VIDEO!**

**PREMIUM**

**PASSO 1:** La lozione micellare Pre-Care dovrebbe essere usato come un detergente per rimuovere il make-up prima di ogni trattamento Wellbox® [S]. Lenisce la pelle e offre la massima idratazione.





**STEP 2: ANTI-AGING FACE CARE**

[2]



[2]

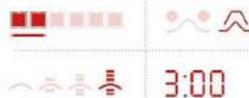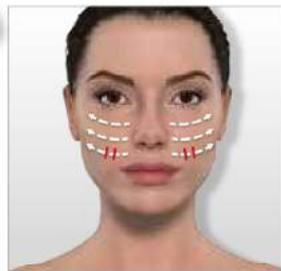

[2]



[1]



[1]



**PASSO 3:**

Il Total Eye Care leviga borse, rughe e attenua le occhiaie scure del contorno occhi, i miei occhi sono immediatamente più freschi.



**P11**

**PASSO 4:** Il Rinnovamento siero Anti-aging Renewal Serum concentra il 22% dei principi attivi noti per il loro potere anti-invecchiamento. Essi agiscono al centro della fibroblasti per aumentare la produzione di collagene ed elastina. Questo siero affina la pelle, la rende più luminosa, idratata e le rughe vengono smussate.



**PASSO 5:** Grazie al suo esclusivo LPG® Anti-aging Complex a base di acido ialuronico, la Crema Rassodante Replenishing dona volume, leviga e ridensifica la pelle.




**AZIONE RASSODAMENTO**

**> PROGRAMMA RASSODAMENTO VISO 6 min**

**PASSO 1:** Pulire e preparare la pelle con la Lozione Micellare Pre-Trattamento, che lenisce e fornisce la massima idratazione alla pelle.



**PASSO 2: TRATTAMENTO RASSODANTE VISO**

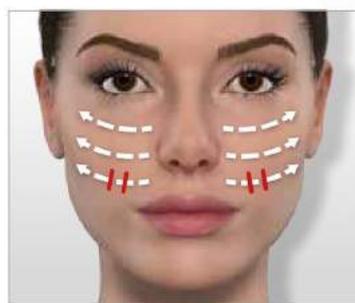

[2]



3:00



[2]



3:00

**P 12**

**PASSO 3:** Il Total Eye Care leviga borse, rughe e occhiaie dalla zona del contorno occhi, i miei occhi sono immediatamente più freschi.



**PASSO 4:** Il Radiance Brightening Serum, arricchito con vitamina C e l'esclusivo LPG® Anti-Aging Complex, illumina e uniforma la pelle. Può anche diminuire le macchie di pigmentazione.



**PASSO 5:** Grazie al suo esclusivo LPG® Anti-aging Complex a base di acido ialuronico, la Crema Rassodante Replenishing dona volume, leviga e ridensifica la pelle.




**AZIONE DETOX**

**> IL MIO TRATTAMENTI OCCHI RIPOSATI | 6 min**


**PASSO 1:** La lozione micellare Pre-Care dovrebbe essere usato come un detergente per rimuovere il make-up prima di ogni trattamento Wellbox<sup>®</sup> [S]. Lenisce la pelle e offre la massima idratazione.



**PASSO 2: PROGRAMMA OCCHI RIPOSATI**

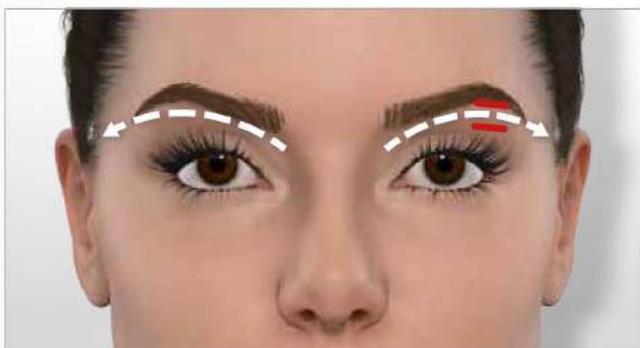

3:00

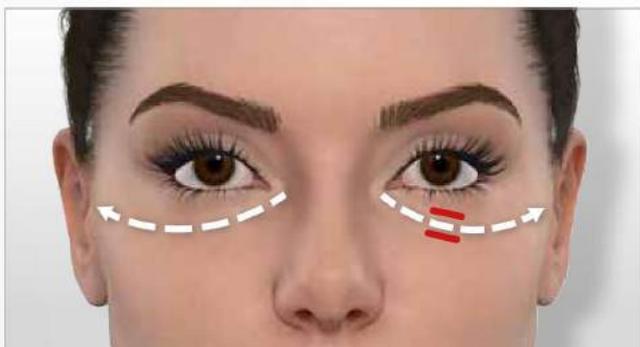

3:00

**P 13**

**PASSO 3:** Il Total Eye Care leviga borse, rughe e attenua le occhiaie scure del contorno occhi, i miei occhi sono immediatamente più freschi.




**AZIONE DETOX**

**> PROGRAMMA DETOX 6 min**



**PASSO 1:** pulire e preparare la pelle con il Pre-Care Micellar Lotion, che lenisce e fornisce la massima idratazione alla pelle.

**PASSO 2: TRATTAMENTO DETOX**

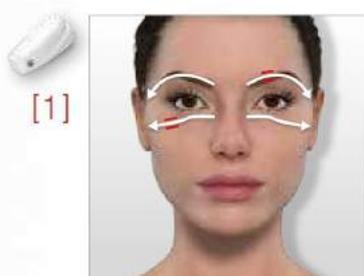

**PASSO 3:**

Il Total Eye Care leviga borse, rughe e attenua le occhiaie scure del contorno occhi, i miei occhi sono immediatamente più freschi.

**PASSO 4:** Grazie all' Intense Hydrating Smoothing Serum, la mia pelle è idratata a lungo, è liscia e ritrova la sua morbidezza. La sua pellicola di acido ialuronico protegge anche la mia pelle da sollecitazioni esterne.

**PASSO 5:** Infine applico il Complete Correction Fluid SPF15 per un effetto sano e luminoso istantaneo. Leggermente colorato, questo fluido può levigare le imperfezioni della pelle. Il suo fattore solare (SPF 15) impedisce i segni di invecchiamento proteggendo dall' esposizione quotidiana.

**AZIONE SNELLENTI**


**> PROGRAMMA VISO SCOLPITO**

**6 min**

**PASSO 1:** Pulire e preparare la pelle con la Lozione Micellare Pre-Trattamento, che lenisce e fornisce la massima idratazione alla pelle.



**PASSO 2: TRATTAMENTO VISO SCOLPITO**

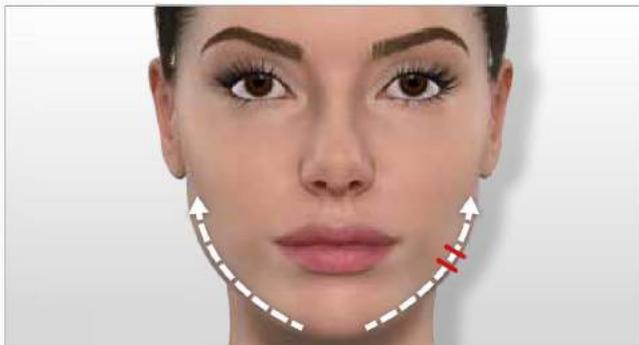

4:00



2:00

**P 15**

**PASSO 3:** La Crema Rassodante V-Shaping aiuta a ridurre il doppio mento e rassoda i contorni del viso, grazie all'esclusivo Complesso LPG<sup>®</sup> anti-invecchiamento.



## PROGRAMMI CORPO

ISTRUZIONI PER IL CORPO P17

### AZIONE RASSODANTE

RASSODAMENTO BRACCIA P18

RASSODAMENTO PANCIA P19

RASSODAMENTO GLUTEI P20

RASSODAMENTO COSCE P21

### AZIONE DIMAGRANTE

BRACCIA TONIFICATE P22

PROGRAMMA PANCIA PIATTA P23

ANTI-MANIGLIE DELL'AMORE P24

PROGRAMMA SNELLENTI COSCE P25

PROGR. SNELLENTI GINOCCHIA P26

PROGRAMMA SNELLENTI POLPACCI P27

### AZIONE ANTI-CELLULITE

ANTI-CELLULITE GLUTEI P28

ANTI-CELLULITE COSCE P29

PROGRAMMA ANTI-CUSCINETTI P30

### AZIONE BENESSERE

PROGRAMMA GAMBE LEGGERE P31

*Please carefully read the manual  
before using your Wellbox® [S].*

## > ISTRUZIONI PER IL **CORPO**



La potenza di aspirazione deve essere regolata a seconda della sensazione e della qualità della pelle. Fare attenzione a non aumentarla troppo su aree sensibili, come l'interno braccia e l'interno cosce.



Questi due pittogrammi sono previsti solo a scopo informativo. Essi vi guideranno attraverso i programmi e indicheranno quali testine di trattamento utilizzare in base alla sequenza di aspirazione selezionata.



La sequenza di aspirazione rappresenta il numero di aspirazioni al secondo. Più alta è la frequenza più vicina alla superficie della pelle sarà l'azione; rassodamento o luminosità.

Al contrario, una sequenza di aspirazione più bassa avrà un'azione più in profondità, ideale per riempire le rughe.



La freccia bianca indica la direzione che la testina di trattamento deve seguire.

Quando si usa la testina ROLL 3, usare l'innesco per modificare la direzione dei rulli.



Le linee rosse indicano la posizione dei rulli durante il movimento della testina di trattamento.



I cosmetici Endermologie<sup>®</sup> aiutano a potenziare l'azione della Wellbox<sup>®</sup> [S]. Una volta stimolato, la pelle diventa più ricettiva ai principi attivi contenuti nei prodotti cosmetici.

**AZIONE RASSODANTE**

**> TRATTAMENTO BRACCIA SODE 6 min**

**PASSO 1:** Ogni mattina, applicare la crema corpo Glowing Resurfacing Body Cream, per un effetto pelle rinnovata giorno dopo giorno. La sua azione di micro-peeling agisce efficacemente sulle piccole imperfezioni della pelle (smagliature, cicatrici ...).



**PASSO 2: PROGRAMMA RASSODAMENTO BRACCIA**



3:00



3:00

P 18

**PASSO 3:** Applicare il siero rassodante Firming Contour Fluid sull'area trattata per un immediato e duraturo effetto lifting.





**AZIONE RASSODANTE**

**> TRATTAMENTO RASSODANTE PANCIA 6 min**


**PASSO 1:** Ogni mattina, applicare la crema corpo Glowing Resurfacing Body Cream, per un effetto pelle rinnovata giorno dopo giorno. La sua azione di micro-peeling agisce efficacemente sulle piccole imperfezioni della pelle (smagliature, cicatrici ...).



**PASSO 2: PROGRAMMA RASSODAMENTO PANCIA**

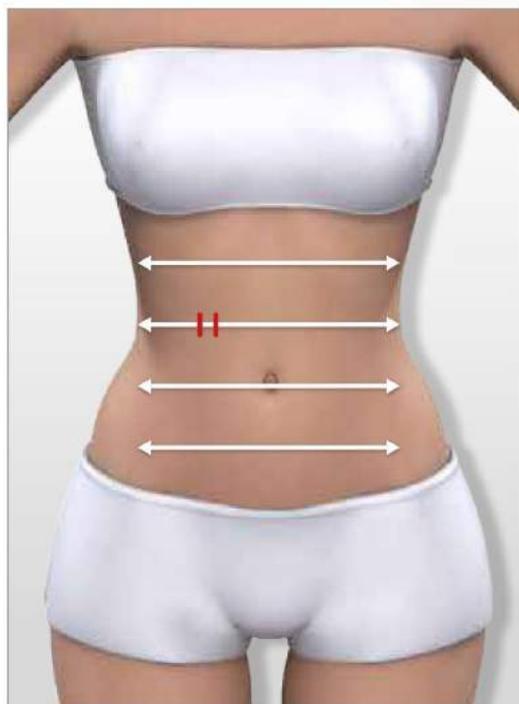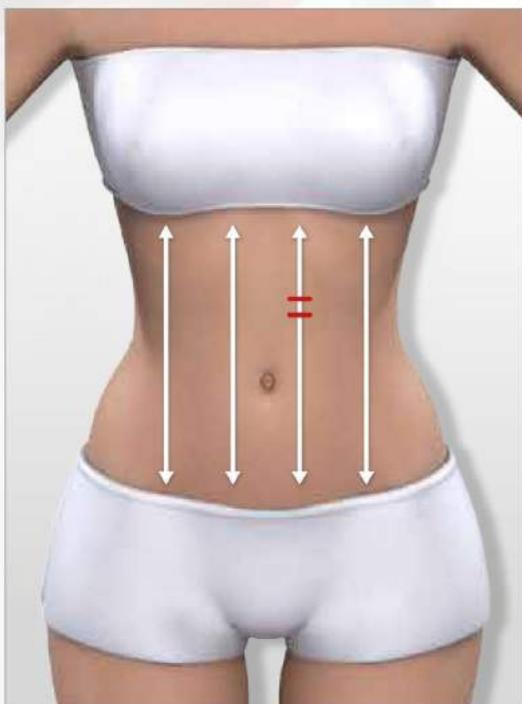

P 19

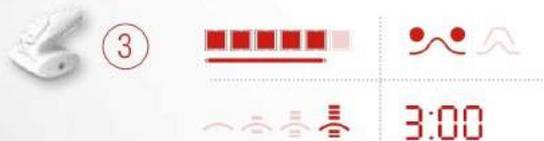

**PASSO 3:** Applicare il siero rassodante Firming Contour Fluid sull'area trattata per un immediato e duraturo effetto lifting.




**AZIONE RASSODANTE**

**> TRATTAMENTO RASSODANTE GLUTEI 6 min**

**PASSO 1:** Ogni mattina, applicare la crema corpo Glowing Resurfacing Body Cream, per un effetto pelle rinnovata giorno dopo giorno. La sua azione di micro-peeling agisce efficacemente sulle piccole imperfezioni della pelle (smagliature, cicatrici ...).




**PASSO 2: PROGRAMMA RASSODAMENTO GLUTEI**

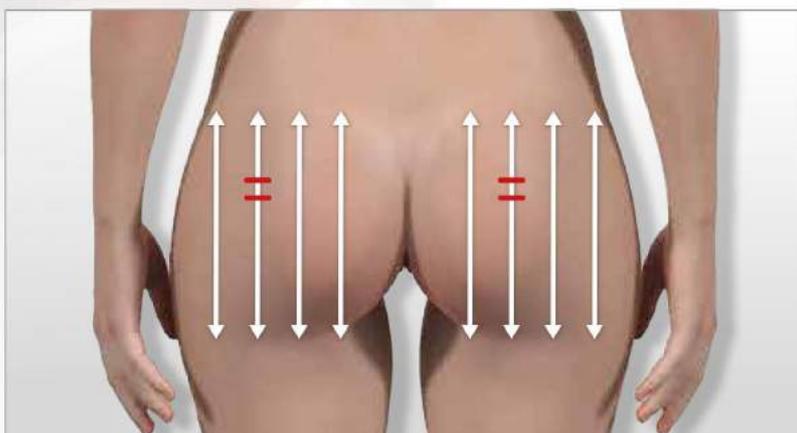

3:00

P 20

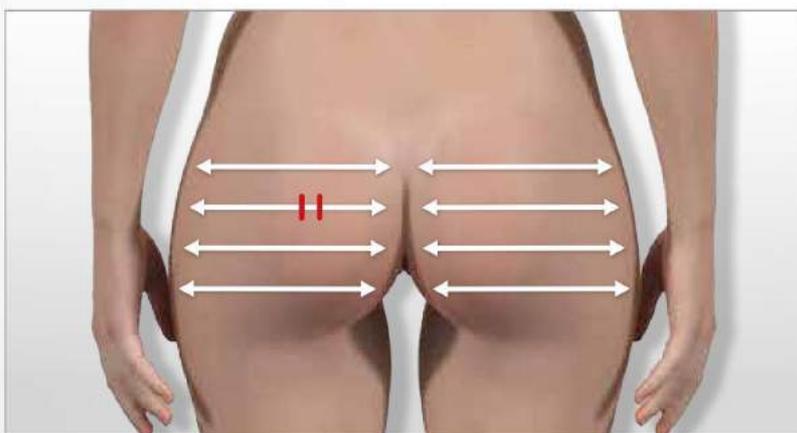

3:00

**PASSO 3:** Applicare il siero rassodante Firming Contour Fluid sull'area trattata per un immediato e duraturo effetto lifting.





**AZIONE RASSODANTE**

**> TRATTAMENTO RASSODANTE COSCE 6 min**


**PASSO 1:** Ogni mattina, applicare la crema corpo Glowing Resurfacing Body Cream, per un effetto pelle rinnovata giorno dopo giorno. La sua azione di micro-peeling agisce efficacemente sulle piccole imperfezioni della pelle (smagliature, cicatrici ...).



**PASSO 2: PROGRAMMA RASSODAMENTO COSCE**

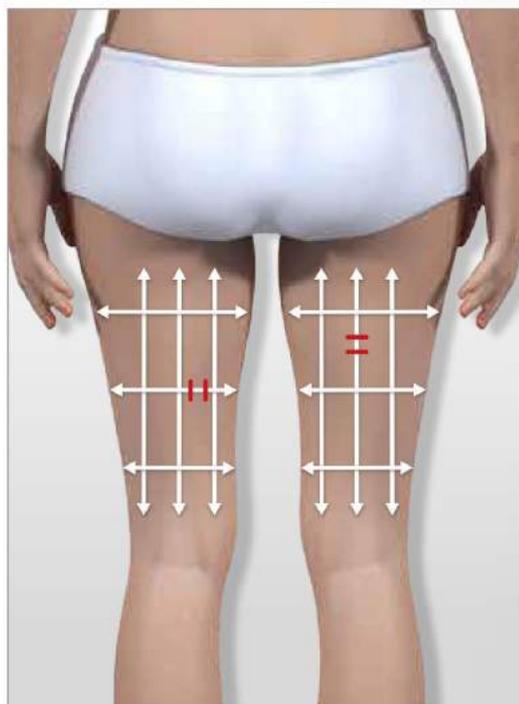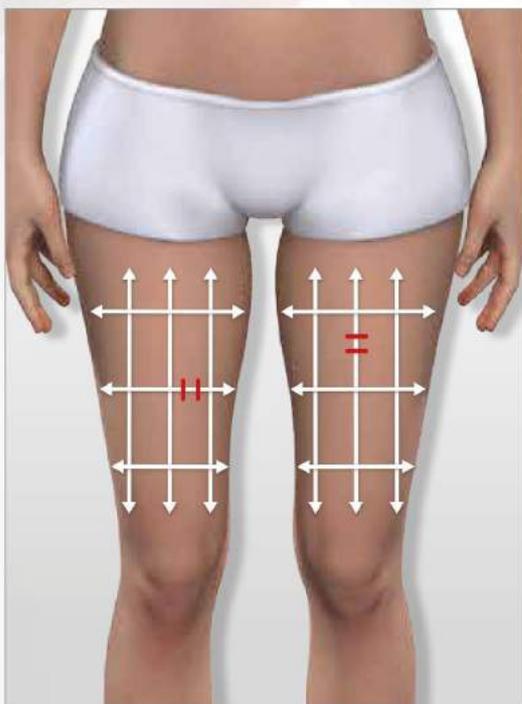

P21

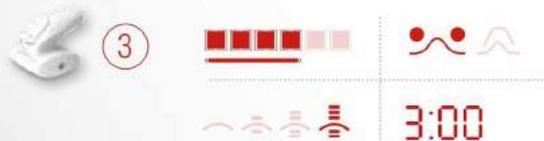

**PASSO 3:** Applicare il siero rassodante Firming Contour Fluid sull'area trattata per un immediato e duraturo effetto lifting.



## AZIONE SNELLENTI

### > TRATTAMENTO BRACCIA TONICHE **6 min**

**PASSO 1:** Ogni mattina, applicare la crema corpo Glowing Resurfacing Body Cream, per un effetto pelle rinnovata giorno dopo giorno. La sua azione di micro-peeling agisce efficacemente sulle piccole imperfezioni della pelle (smagliature, cicatrici ...).



### PASSO 2: PROGRAMMA RASSODAMENTO BRACCIA



4:00



2:00

**PASSO 3:** Applicare il siero rassodante Firming Contour Fluid sull'area trattata per un immediato e duraturo effetto lifting.



**AZIONE SNELLENTI**



> **TRATTAMENTO PANCIA PIATTA 6 min**



**PASSO 1:** Ogni mattina, applicare la crema corpo Glowing Resurfacing Body Cream, per un effetto pelle rinnovata giorno dopo giorno. La sua azione di micro-peeling agisce efficacemente sulle piccole imperfezioni della pelle (smagliature, cicatrici ...).



**PASSO 2: PROGRAMMA PANCIA PIATTA**

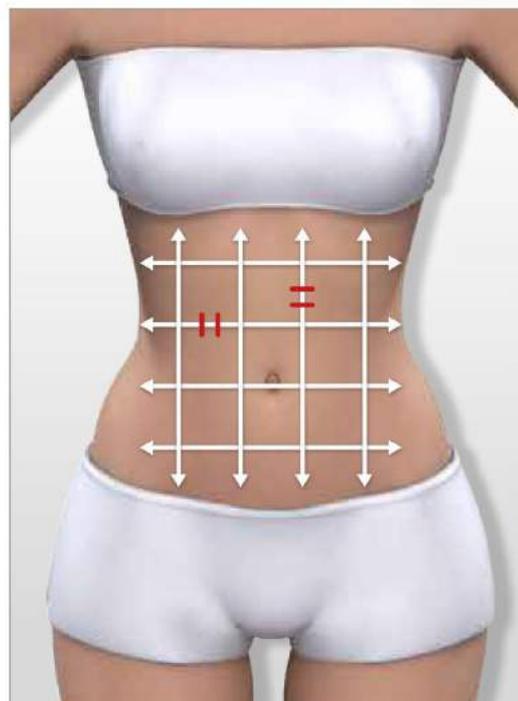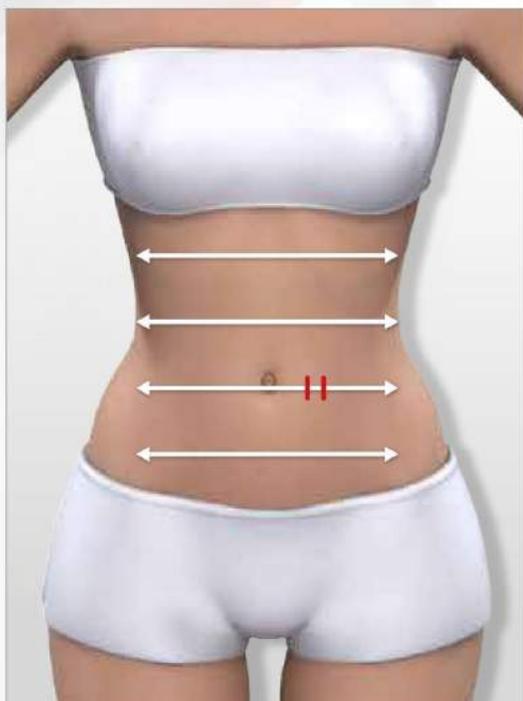

**P23**

③

4:00

③

2:00

**PASSO 3:** Applicare il siero rassodante Firming Contour Fluid sull'area trattata per un immediato e duraturo effetto lifting.



**AZIONE SNELLENT**

> **TRATTAMENTO ANTI-MANIGLIE DELL'AMORE**

**6 min**

**PASSO 1:** Ogni mattina, applicare la crema corpo Glowing Resurfacing Body Cream, per un effetto pelle rinnovata giorno dopo giorno. La sua azione di micro-peeling agisce efficacemente sulle piccole imperfezioni della pelle (smagliature, cicatrici ...).



**PASSO 2: PROGRAMMA ANTI-MANIGLIE DELL'AMORE**




**P24**





  
**2:00**  
ON EACH SIDE



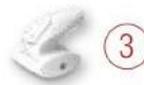

  
**1:00**  
ON EACH SIDE

**PASSO 3:** Applicare il siero rassodante Firming Contour Fluid sull'area trattata per un immediato e duraturo effetto lifting.



**AZIONE SNELLENTI**

**> PROGRAMMA SNELLENTI COSCE 6 min**



**PASSO 1:** Ogni mattina, applicare la crema corpo Glowing Resurfacing Body Cream, per un effetto pelle rinnovata giorno dopo giorno. La sua azione di micro-peeling agisce efficacemente sulle piccole imperfezioni della pelle (smagliature, cicatrici ...).





**STEP 2: PROGRAMMA SNELLENTI COSCE**



Molto spesso un rilassamento della pelle nella parte interna delle cosce è scambiato per un problema di cellulite, quando in realtà è una mancanza di fermezza. Non è pertanto raccomandato il programma snellente su questa parte del corpo. Si dovrebbe invece optare per la cura rassodante.

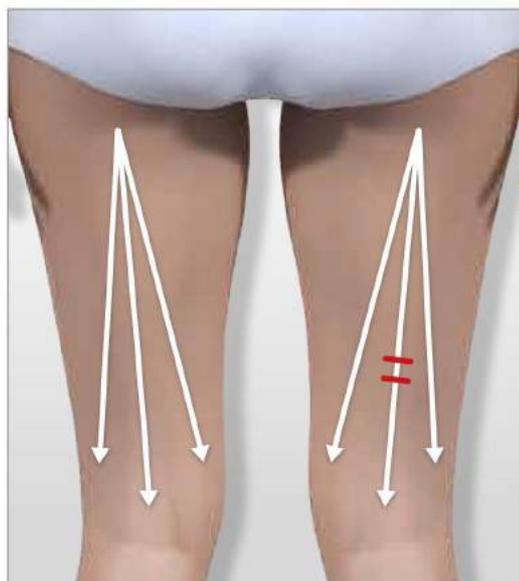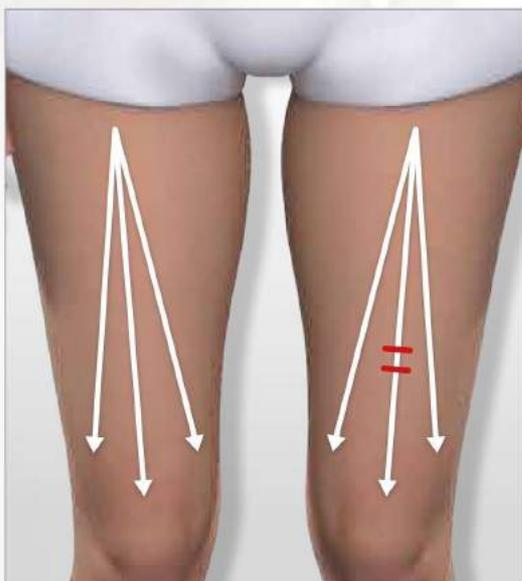

**P 25**

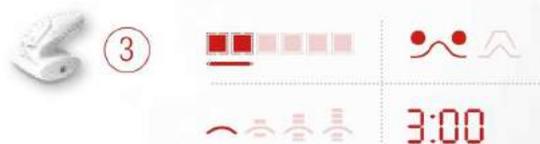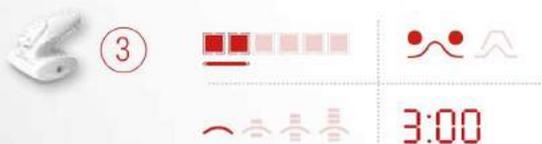

*Si consiglia vivamente di rassodare il tessuto dopo la perdita di grasso.  
Consigliato finire la sessione con il trattamento rassodante cosce.*

**PASSO 3:** L'esclusivo LPG Slimming Complex - contenente caffeina consente al Body Shaping Gel di ridurre gli eccessi di grasso.





**AZIONE SNELLENTA**

**> TRATTAMENTO SNELLENTA GINOCCHIA 6 min**



**PASSO 1:** Ogni mattina, applicare la crema corpo Glowing Resurfacing Body Cream, per un effetto pelle rinnovata giorno dopo giorno. La sua azione di micro-peeling agisce efficacemente sulle piccole imperfezioni della pelle (smagliature, cicatrici ...).



**PASSO 2: PROGRAMMA SNELLENTA GINOCCHIA**

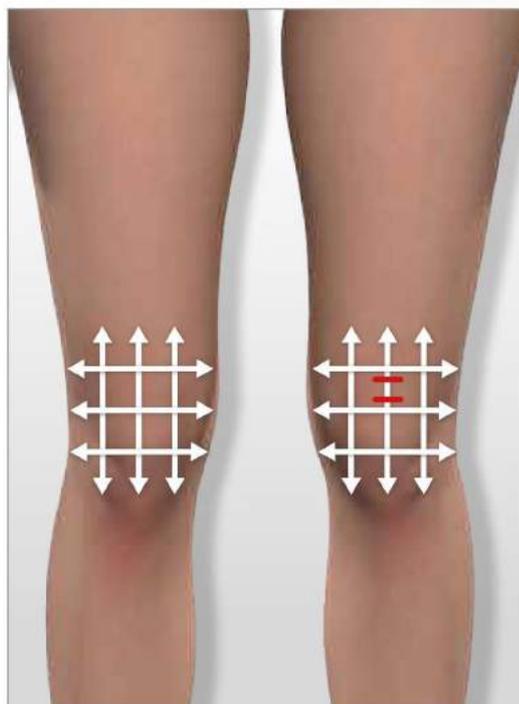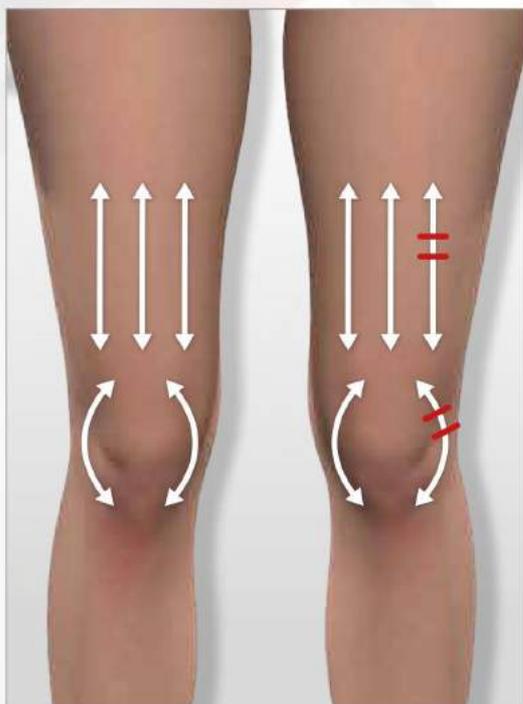

P 26

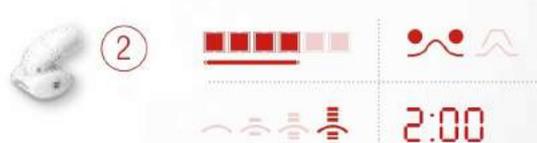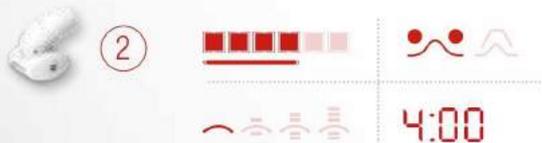

**PASSO 3:** L'esclusivo LPG Slimming Complex - contenente caffeina consente al Body Shaping Gel di ridurre gli eccessi di grasso.




**AZIONE SNELLENTI**

**> TRATTAMENTO GINOCCHIA SNELLE 6 min**

**PASSO 1:** Ogni mattina, applicare la crema corpo Glowing Resurfacing Body Cream, per un effetto pelle rinnovata giorno dopo giorno. La sua azione di micro-peeling agisce efficacemente sulle piccole imperfezioni della pelle (smagliature, cicatrici ...).



**PASSO 2: PROGRAMMA SNELLENTI GINOCCHIA**

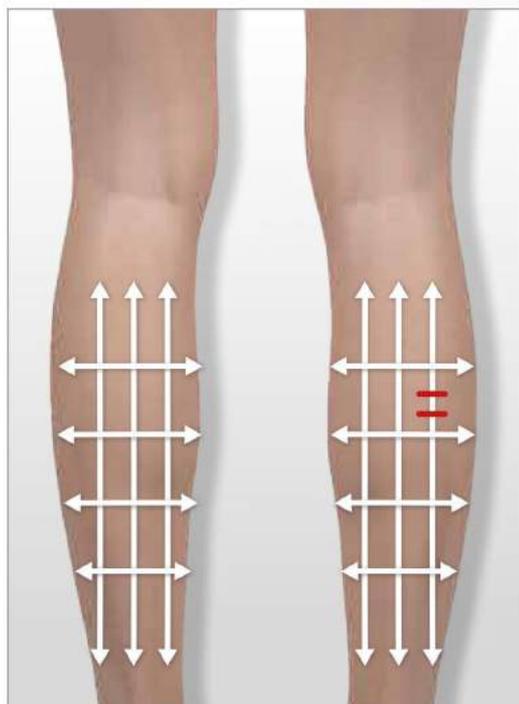

**P27**


2


4:00


2


2:00

**PASSO 3:** Arricchito con l'esclusivo LPG® Slimming Complex, il Siero Drenante Detox aiuta ad eliminare rapidamente ed efficacemente le rotondità di tutto il corpo. e' associato con Escina, la cui azione drenante combatte efficacemente la cellulite acquosa.



**AZIONE ANTI-CELLULITE**


**> TRATTAMENTO ANTI-CELLULITE GLUTEI**

**6 min**

**PASSO 1:** Ogni mattina, applicare la crema corpo Glowing Resurfacing Body Cream, per un effetto pelle rinnovata giorno dopo giorno. La sua azione di micro-peeling agisce efficacemente sulle piccole imperfezioni della pelle (smagliature, cicatrici ...).




**STEP 2: PROGRAMMA GLUTEI ANTI CELLULITE**

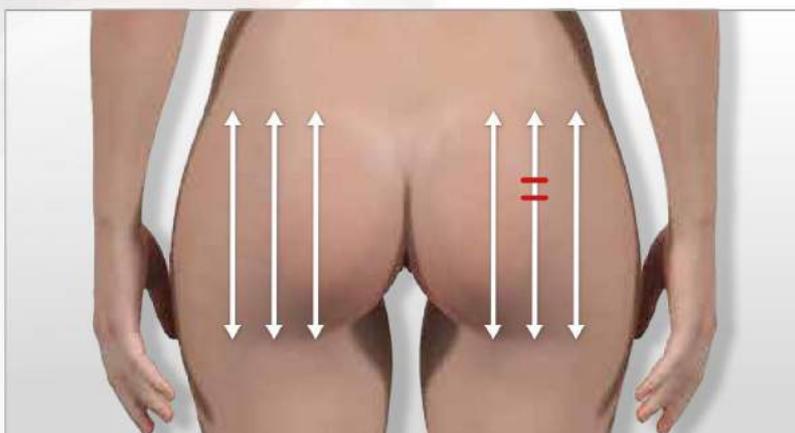

**4:00**

**P 28**

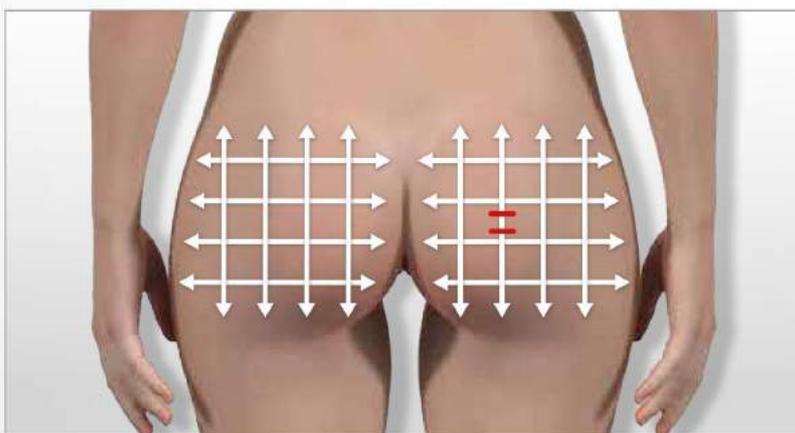

**2:00**

**STEP 3:** L'esclusivo LPG<sup>®</sup> Slimming Complex - contenente caffeina pura, permette all'Orange Peel Smoothing Complex di incentivare l'eliminazione dei grassi e levigare la cellulite.



**AZIONE ANTI-CELLULITE**



**> TRATTAMENTO ANTI CELLULITE COSCE 6 min**



**PASSO 1:** Ogni mattina, applicare la crema corpo Glowing Resurfacing Body Cream, per un effetto pelle rinnovata giorno dopo giorno. La sua azione di micro-peeling agisce efficacemente sulle piccole imperfezioni della pelle (smagliature, cicatrici ...).





**PASSO 2: PROGRAMMA ANTI-CELLULITE COSCE**



Molto spesso un rilassamento della pelle nella parte interna delle cosce è scambiato per un problema di cellulite, quando in realtà è una mancanza di fermezza. Non è pertanto raccomandato il programma snellente su questa parte del corpo. Si dovrebbe invece optare per la cura rassodante.

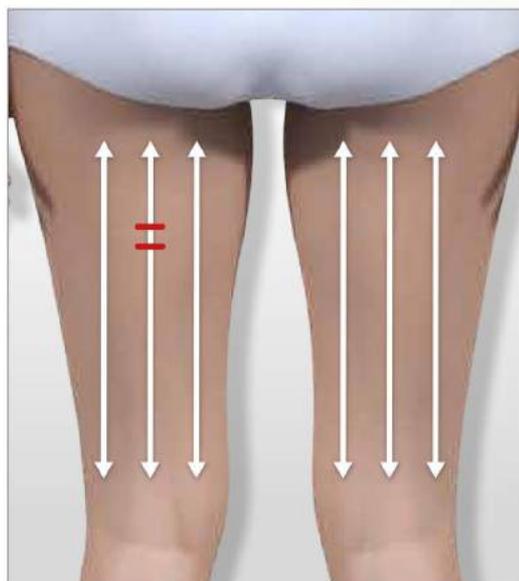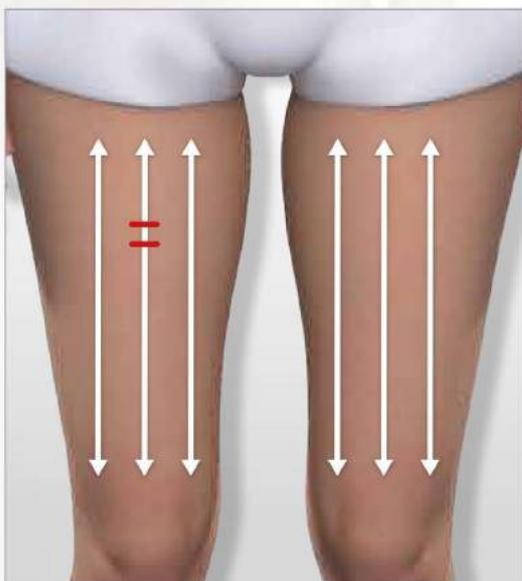

**P 29**

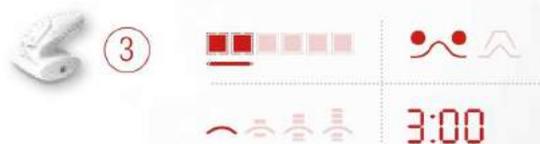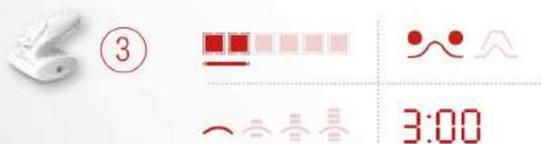

*Si consiglia vivamente di rassodare il tessuto dopo la perdita di grasso.  
Consigliato finire la sessione con il trattamento rassodante cosce.*

**STEP 3:** L'esclusivo LPG® Slimming Complex - contenente caffeina pura, permette all'Orange Peel Smoothing Complex di incentivare l'eliminazione dei grassi e levigare la cellulite.



**AZIONE ANTI-CELLULITE**

**> TRATTAMENTO ANTI-CUSCINETTI 6 min**

**PASSO 1:** Ogni mattina, applicare la crema corpo Glowing Resurfacing Body Cream, per un effetto pelle rinnovata giorno dopo giorno. La sua azione di micro-peeling agisce efficacemente sulle piccole imperfezioni della pelle (smagliature, cicatrici ...).



**PASSO 2: PROGRAMMA ANTI-CUSCINETTI**



**P 30**







  
**2:00**  
ON EACH SIDE







  
**1:00**  
ON EACH SIDE

**STEP 3:** L'esclusivo LPG® Slimming Complex - contenente caffeina pura, permette all'Orange Peel Smoothing Complex di incentivare l'eliminazione dei grassi e levigare la cellulite.



**AZIONE BENESSERE**







**> TRATTAMENTO GAMBE LEGGERE 6 min**



**PASSO 1:** Ogni mattina, applicare la crema corpo Glowing Resurfacing Body Cream, per un effetto pelle rinnovata giorno dopo giorno. La sua azione di micro-peeling agisce efficacemente sulle piccole imperfezioni della pelle (smagliature, cicatrici ...).



**PASSO 2: PROGRAMMA GAMBE LEGGERE**

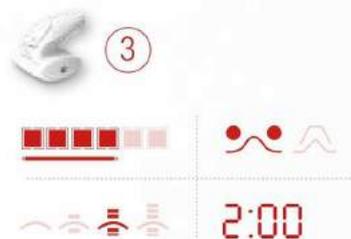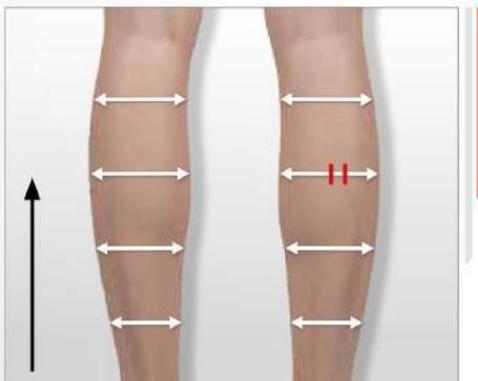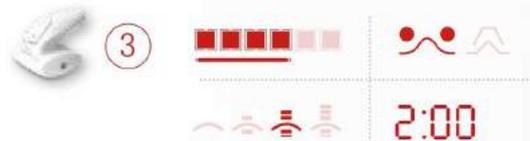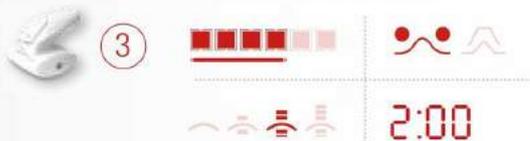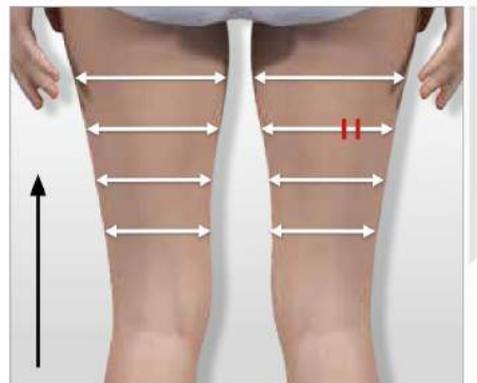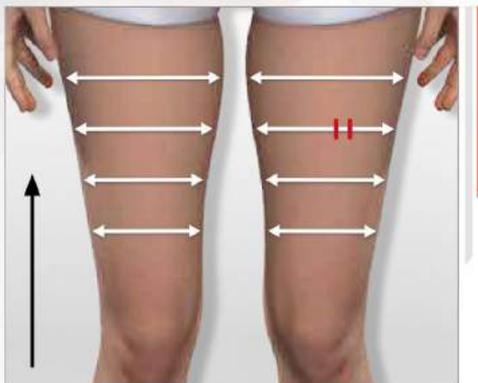

P31

**PASSO 3:** Per il massimo comfort, spruzzare sulle gambe lo spray Light Legs Mist dalle caviglie verso l'alto. Stimola la microcircolazione e decongiona le gambe.





Trovi tutti i programmi Wellbox e le ricerche scientifiche su  
[www.wellbox.com](http://www.wellbox.com)