




COSTRUZIONE
PROTESI
FONETICHE
dal 1975


- IT** Manuale D'uso
- EN** User Manual
- FR** Mode D'emploi
- EL** Εγχειρίδιο
- ES** Manual Del Usuario
- PT** Manual do usuário
- RO** Ghid De Utilizare
- PL** Instrukcja Obsługi
- TR** Kullanım Kılavuzu

55X


[A]

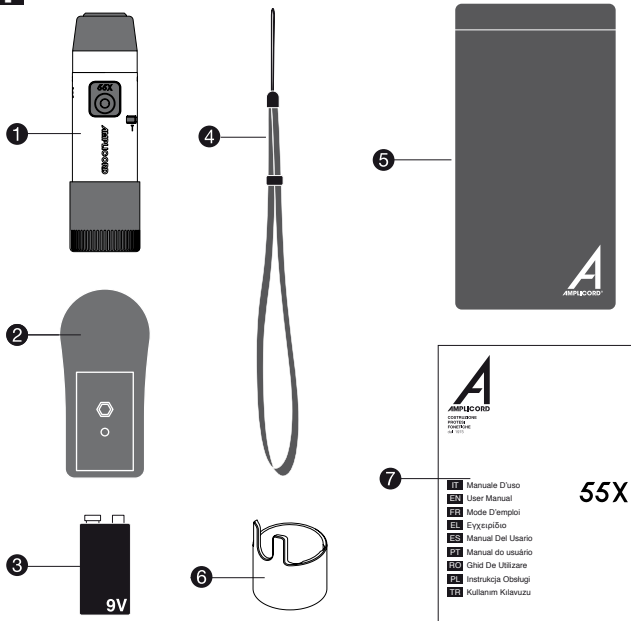


[B]

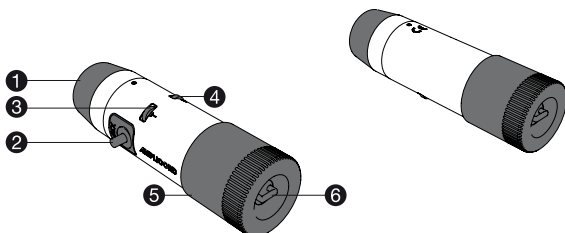


[C] 1

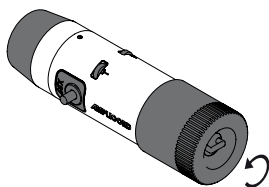


[C] 2

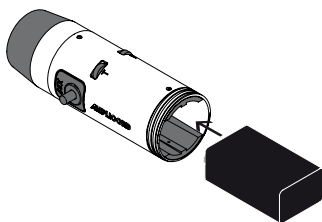


[C] 3

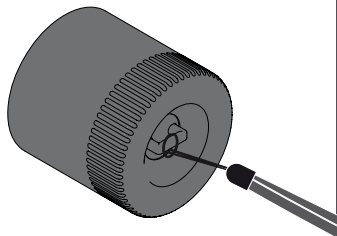


[C] 4

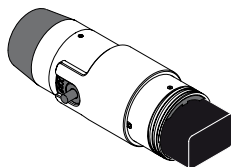


[C] 5

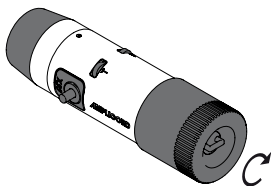


[D] 1

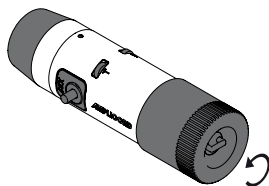


[D] 2

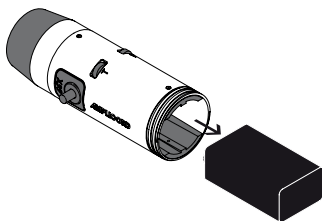


[D] 3






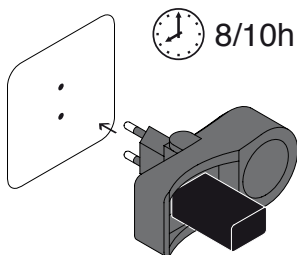


[D] 4

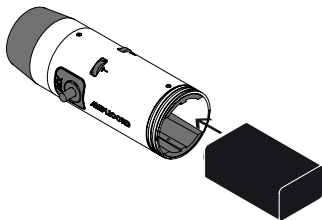

[D] 5

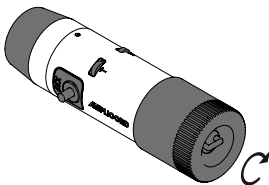

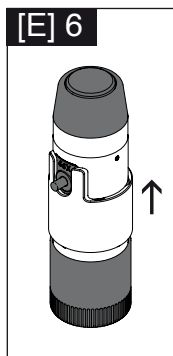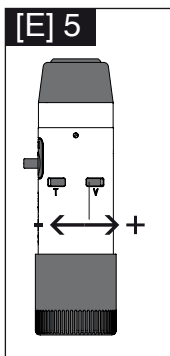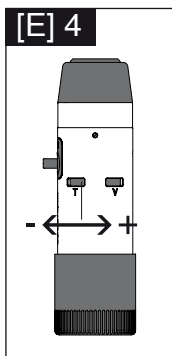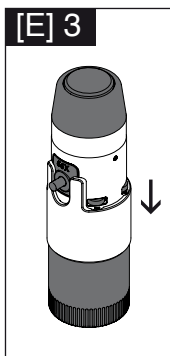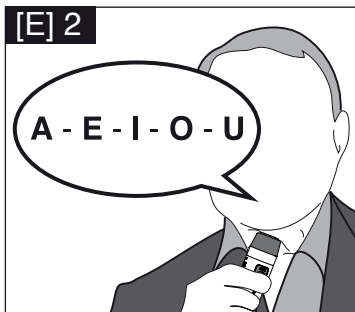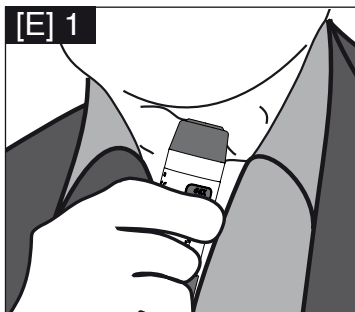

Contenuto della confezione [A]

- | | |
|---|---------------------|
| ❶ Amplicord 55X | ❹ Laccio |
| ❷ Alimentatore AC 220V 50Hz
DC 9V 30mA | ❺ Custodia |
| ❸ Batteria ricaricabile 8.4V 250mAh | ❻ Blocca regolatori |
| | ❼ Manuale utente |

Descrizione del prodotto [B]

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ❶ Testina | ❹ Regolatore del volume |
| ❷ Pulsante | ❺ Tappo batteria |
| ❸ Regolatore del tono | ❻ Attacco laccio |

Per iniziare [C]

1. Svitare il tappo batteria.
2. Inserire la batteria allineando i contatti.
3. Se lo si desidera, attaccare il laccio.
4. Se lo si desidera, applicare il blocca regolatori.
5. Riavvitare il tappo batteria.

Ricaricare la batteria [D]

1. Svitare il tappo batteria.
2. Rimuovere la batteria.
3. Inserire la batteria nel carica batteria ed attaccarlo alla presa della corrente. Per ricaricare completamente la batteria servono circa 8/10 ore.
4. Rimuovere la batteria carica ed inserirla nuovamente nel laringofono allineando i contatti.
5. Riavvitare il tappo batteria.

Istruzioni per l'uso [E]

1. Poggiare il dispositivo con una leggera e omogenea pressione sopra la parte più morbida della gola.
2. Premere il pulsante per attivare il funzionamento del laringofono e provare la voce del dispositivo vocalizzando le lettere **A - E - I - O - U**.
3. *In caso abbiate applicato il blocca regolatori, fatelo scorrere verso il basso fino a scoprire i regolatori stessi.*
4. Utilizzare il regolatore del tono **T** per raggiungere la tonalità desiderata.
5. Utilizzare il regolatore del volume **V** per raggiungere il livello desiderato.
6. *In caso abbiate applicato il blocca regolatori, fatelo scorrere verso l'alto fino a coprire i regolatori stessi.*

Manutenzione

La manutenzione deve essere effettuata dal distributore. La pulizia del dispositivo può essere effettuata con la frequenza desiderata, utilizzando un panno con un po' di alcool denaturato.

Garanzia

Il dispositivo Amplicord 55X è garantito in ogni suo componente per due anni (24 mesi) dalla data di acquisto contro qualsiasi difetto di materiale o di costruzione. La garanzia consiste nella sostituzione e/o riparazione gratuita dei componenti difettosi. La garanzia decade se l'apparecchio è stato manomesso, se il difetto deriva da uso improprio e salvo cadute. Sono esclusi dalla garanzia l'alimentatore e la batteria ricaricabile.

Thank you for choosing the new Amplicord 55X electrolarynx, a simple and functional device to fit your lifestyle.

Contents of the Box [A]

- | | |
|--|------------------|
| ❶ Amplicord 55X | ❷ Security Strap |
| ❷ Power charger AC 220V 50Hz
DC 9V 30mA | ❸ Slip Case |
| ❸ 8.4V 250mAh rechargeable battery | ❹ Dial stopper |
| | ❺ User's Guide |

Product Description [B]

- | | |
|----------------------|------------------------|
| ❶ Device Head | ❷ Volume Dial V |
| ❷ Power button | ❸ Battery cover |
| ❸ Tone Dial T | ❹ Strap Hook |

Getting Started with Your Device [C]

1. Unscrew the battery cover.
2. Insert the batter, matching the + and - contacts.
3. If desired, attach the strap.
4. If desired, insert the dial stopper.
5. Screw the battery cover back on.

Recharging the Battery [D]

1. Unscrew the battery cover.
2. Remove the battery.
3. Insert the battery in the battery charger and plug it into a power outlet. It will take 8/10 hours to fully recharge the battery.
4. Remove the charged battery and insert it into the electrolarynx, aligning the contacts.
5. Screw the battery cover back on.

Instructions for Use [E]

1. Apply the device onto the softer part of the neck, with a light and even pressure.
2. Press the button to activate the electrolarynx and test it by vocalising the letters **A - E - I - O - U**.
3. *If you have inserted the dial stopper, slide it down to access the dials.*
4. Use the **T** dial to adjust to the desired tone.
5. Use the **V** dial to adjust to the desired volume.
6. *If you have inserted the dial stopper, slide it back up to lock the dials at the desired settings.*

Device Maintenance

Maintenance will be carried out by the dealer. The device may be cleaned as often as needed, using a piece of cloth and some rubbing alcohol (surgical spirit).

Warranty

The Amplicord 55X carries a 2-Year Limited Warranty (24 months) for each of its components, valid from the Date of Purchase. The device is guaranteed against manufacturing defects (defined as a defect in materials or workmanship). The warranty states that a free replacement and/or repair will be provided for any faulty components, during the applicable warranty period. This warranty will lose validity should the device show signs of manumission, or if the defect is a result of improper use or accidental drops or falls. The power charger and the rechargeable battery are excluded from this warranty.

Nous vous remercions d'avoir choisi notre nouveau laryngophone Amplicord 55X, un dispositif facile à utiliser au service de votre voix.

Contenu du coffret [A]

- | | |
|---|-----------------------------|
| ❶ Amplicord 55X | ❹ Sangle |
| ❷ Câble d'alimentation AC 220V 50Hz
DC 9V 30mA | ❺ Boîtier |
| ❸ Batterie rechargeable 8.4V 250mAh | ❻ Verrouilleur de contrôles |
| | ❼ Guide d'utilisation |

Description du produit [B]

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| ❶ Tête | ❹ Réglage du volume V |
| ❷ Bouton | ❺ Couvercle de la batterie |
| ❸ Réglage du ton T | ❻ Attache de la sangle |

Pour commencer [C]

1. Dévissez le couvercle de la batterie.
2. Insérez la batterie en positionnant correctement les contacts.
3. Si vous souhaitez utiliser la sangle, attachez-la.
4. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le verrouilleur de contrôles.
5. Revissez le couvercle de la batterie.

Rechargez la batterie [D]

1. Dévissez le couvercle de la batterie.
2. Retirez la batterie.
3. Insérez la batterie dans le chargeur de batteries et connectez-le à une prise électrique. Il faut 8/10 heures pour recharger totalement la batterie.
4. Lorsque la batterie est chargée, retirez-la et remettez-la dans le laryngophone en positionnant correctement les contacts.
5. Revissez le couvercle de la batterie.

Mode d'emploi [E]

1. Appuyez le dispositif avec une légère pression homogène sur la partie la plus molle de la gorge.
2. Appuyez sur le bouton pour activer le fonctionnement du laryngophone et tester la voix du dispositif en prononçant les lettres **A - E - I - O - U**.
3. *Au cas où vous utiliseriez le verrouilleur de contrôles, abaissez-le pour rendre les contrôles accessibles.*
4. Utilisez le réglage du ton **T** pour obtenir la tonalité souhaitée.
5. Utilisez le réglage du volume **V** pour obtenir le niveau sonore souhaité.
6. *Au cas où vous utiliseriez le verrouilleur de contrôles, faites-le remonter pour occulter les contrôles.*

Entretien

L'entretien doit être réalisé par le distributeur. Vous pouvez nettoyer l'appareil aussi souvent que vous le souhaitez au moyen d'un chiffon imbibé d'un peu d'alcool dénaturé.

Garantie

Tous les composants de l'appareil Amplicord 55X sont garantis pendant deux ans (24 mois) à compter de la date d'achat contre tout défaut matériel ou de fabrication. La garantie couvre le remplacement et/ou la réparation gratuite des composants défectueux. La garantie cesse de s'appliquer si l'appareil a été altéré, si le défaut est dû à une utilisation incorrecte ou en cas de chute de l'appareil. Le câble d'alimentation et la batterie rechargeable ne sont pas couverts par la garantie.

***Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το νέο ηλεκτρονικό
λαρυγγόφωνο Amplicord 55X, μια απλή και λειτουργική
συσκευή που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σας.***

Περιεχόμενα του κουτιού [A]

- ❶ Amplicord 55X
- ❷ Φορτιστής AC 220V 50Hz
DC 9V 30mA
- ❸ Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 8.4V 250mAh
- ❹ Κορδόνι ασφαλείας
- ❺ Προστατευτική θήκη
- ❻ Δακτύλιος για κλείδωμα ρυθμίσεων
- ❼ Εγχειρίδιο χρήστη

Περιγραφή προϊόντος [B]

- ❶ Κεφαλή συσκευής
- ❷ Κουμπί ενεργοποίησης
- ❸ Ρύθμιση τόνου
- ❹ Ρύθμιση έντασης
- ❺ Κάλυμμα μπαταρίας
- ❻ Άγκιστρο κορδονιού

Γνωριμία με τη συσκευή σας [C]

- 1. Ξεβιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
- 2. Τοποθετήστε την μπαταρία σύμφωνα με τις ενδείξεις + και -.
- 3. Εάν επιθυμείτε, δέστε το κορδόνι ασφαλείας.
- 4. Εάν επιθυμείτε, τοποθετήστε τον δακτύλιο για το κλείδωμα ρυθμίσεων.
- 5. Βιδώστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

Επαναφόρτιση μπαταρίας [D]

- 1. Ξεβιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
- 2. Αφαιρέστε τη μπαταρία.
- 3. Τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή και συνδέστε τον στην πρίζα. Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας απαιτεί 8 έως 10 ώρες.
- 4. Αφαιρέστε τη φορτισμένη μπαταρία και επανατοποθετήστε την στη συσκευή, ευθυγραμμίζοντας τις επαφές.
- 5. Βιδώστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

Οδηγίες χρήσης [E]

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μαλακό σημείο του λαιμού σας ασκώντας ελαφρά και ομαλή πίεση.
2. Πιέστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το λαρυγγόφωνο και κάντε μια δοκιμή προφέροντας τους φθόγγους **A-E-I-O-ΟΥ**.
3. *Εάν έχετε τοποθετήσει τον δακτύλιο κλειδώματος ρυθμίσεων, μετακινήστε τον προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στους διακόπτες των ρυθμίσεων.*
4. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ρυθμίσεων **T** για να προσαρμόσετε τον τόνο.
5. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ρυθμίσεων **V** για να ρυθμίσετε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
6. *Εάν έχετε τοποθετήσει τον δακτύλιο κλειδώματος ρυθμίσεων, μετακινήστε τον πάλι προς τα πάνω για να κλειδώσετε τους διακόπτες ρυθμίσεων στην επιθυμητή θέση.*

Συντήρηση

Η συντήρηση πρέπει να γίνεται από τον διανομέα. Να καθαρίζετε την συσκευή σας όσο συχνά το θελήσετε χρησιμοποιώντας ένα πανάκι με λίγο άσπρο οινόπνευμα.

Εγγύηση

Η συσκευή Amplicord 55X είναι σε εγγύηση για όλα της τα μέρη για 2 χρόνια (24 μήνες) από την ημερομηνία αγοράς για κάθε κατασκευαστικό ή άλλο ελάττωμα υλικών. Η εγγύηση συνίσταται στην δωρεάν αντικατάσταση/επισκευή των ελαττωματικών μερών. Η εγγύηση δεν ισχύει αν η συσκευή έχει πειραχτεί, χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα ή έχει δεχτεί πτώσεις. Δεν περιέχονται στην εγγύηση ο φορτιστής και η επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

***Gracias por haber elegido el nuevo laringófono
Amplificord 55X: sencillez y funcionalidad al servicio de
tu voz.***

Contenido de la caja [A]

- | | |
|--|------------------------------|
| ❶ Amplificord 55X | ❷ Correa |
| ❸ Alimentador AC 220V 50Hz
DC 9V 30mA | ❹ Estuche |
| ❺ Batería recargable 8.4V 250mAh | ❻ Bloqueo de los reguladores |
| | ❼ Manual de usuario |

Descripción del producto [B]

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ❶ Cabezal | ❷ Regulador del volumen V |
| ❸ Botón | ❹ Tapa de la batería |
| ❺ Regulador del tono T | ❻ Enganche para la correa |

Para comenzar [C]

1. Desatornillar la tapa de la batería.
2. Insertar la batería alineando los contactos.
3. Si lo desea, enganchar el cordón.
4. Opcionalmente, puede activar el bloqueo de los reguladores.
5. Atornillar la tapa de la batería.

Recargar la batería [D]

1. Desatornillar la tapa de la batería.
2. Retirar la batería.
3. Insertar la batería en el cargador y enchufarlo a una toma de corriente. Para recargar la batería por completo se necesitan 8/10 horas
4. Retirar la batería cargada e insertarla nuevamente en el laringófono, alineando los contactos.
5. Atornillar la tapa de la batería.

Instrucciones de utilización [E]

1. Apoyar el dispositivo con una presión leve y homogénea sobre la parte más blanda de la garganta.
2. Apretar el botón para activar el funcionamiento del laringófono y probar la voz del dispositivo vocalizando las letras **A - E - I - O - U**.
3. *Si se ha activado el bloqueo de los reguladores, deslizarlo hacia abajo hasta llegar a ver los mismos.*
4. Utilizar el regulador del tono **T** para alcanzar la tonalidad deseada.
5. Utilizar el regulador del volumen **V** para alcanzar el nivel deseado.
6. *Si se ha activado el bloqueo de los reguladores, deslizarlo hacia arriba hasta cubrir los mismos.*

Mantenimiento

El distribuidor debe efectuar el mantenimiento del aparato. Se puede limpiar el dispositivo con la frecuencia deseada, utilizando un paño con un poco de alcohol etílico desnaturalizado.

Garantía

Cada uno de los componentes del dispositivo Amplicord 55X tiene una garantía de dos años (24 meses) desde la fecha de compra contra cualquier defecto de material o de fabricación. La garantía consiste en el remplazo y/o reparación gratuitos de los componentes defectuosos. La garantía caduca si el aparato ha sufrido alteraciones, si el defecto deriva de un uso inapropiado o de caídas accidentales. Quedan excluidos de la garantía el alimentador y la batería recargable.

Agradecemos por ter escolhido o novo laringofone Amplicord 55X, simplicidade e funcionalidade ao serviço de sua voz.

Conteúdo da embalagem [A]

- | | |
|--|------------------------|
| ❶ Amplicord 55X | ❹ Tira |
| ❷ Alimentador AC 220V 50Hz
DC 9V 30mA | ❺ Estojo |
| ❸ Bateria recarregável 8.4V 250mAh | ❻ Bloqueio reguladores |
| | ❼ Manual do usuário |

Descrição do produto [B]

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| ❶ Cabeça | ❹ Regulador do volume V |
| ❷ Botão | ❺ Tampa da bateria |
| ❸ Regulador do tom T | ❻ Engate da tira |

Para iniciar [C]

1. Desparafusar a tampa da bateria.
2. Inserir a bateria alinhando os contatos.
3. Se o desejar, pode prender a tira.
4. Se o desejar, pode aplicar o bloqueador de reguladores.
5. Parafusar de novo a tampa da bateria.

Recarregar a bateria [D]

1. Desparafusar a tampa da bateria.
2. Remover a bateria.
3. Inserir a bateria no carregador de bateria e conectá-lo à tomada da corrente. Para recarregar completamente a bateria são necessárias cerca de 8/10 horas.
4. Remover a bateria carregada e inseri-la novamente no laringofone alinhando os contatos.
5. Parafusar de novo a tampa da bateria.

Instruções para o uso [E]

1. Apoiar o dispositivo com uma ligeira e homogênea pressão sobre a parte mais macia da garganta.
2. Premir o botão para ativar o funcionamento do laringofone e testar a voz do dispositivo vocalizando as letras **A - E - I - O - U**
3. *No caso de ter sido aplicado o bloqueador de reguladores, deve-se fazê-lo deslizar para baixo até descobrir os próprios reguladores.*
4. Utilizar o regulador de tom **T** para obter a tonalidade desejada.
5. Utilizar o regulador do volume **V** para obter o nível desejado.
6. *No caso de ter sido aplicado o bloqueador de reguladores, deve-se fazê-lo deslizar para cima até descobrir os próprios reguladores.*

Manutenção

A manutenção deve ser efetuada pelo distribuidor. A limpeza do dispositivo pode ser efetuada com a frequência desejada, utilizando um pano com um pouco de álcool desnatado.

Garantia

O dispositivo Amplicord 55X é garantido em cada um de seus componentes por dois anos (24 meses), a partir da data de aquisição, contra qualquer defeito de material ou de fabricação. A garantia consiste na substituição e/ou reparação gratuita dos componentes defeituosos. A garantia decai se o aparelho foi violado, se o defeito é consequência de uso impróprio e quedas. Ficam excluídos da garantia o alimentador e a bateria recarregável.

Conținutul ambalajului [A]

- | | |
|--|---------------------|
| ❶ Amplicord 55X | ❹ Șnur |
| ❷ Sursă de alimentare AC 220V 50Hz
DC 9V 30mA | ❺ Cutie |
| ❸ Baterie reîncărcabilă 8.4 Volți 250mAh | ❻ Blocare reglaje |
| | ❼ Ghid de utilizare |

Descrierea produsului [B]

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| ❶ Cap | ❹ Reglare volum V |
| ❷ Buton | ❺ Capac baterie |
| ❸ Reglare ton T | ❻ Sistem de prindere șnur |

Instrucțiuni inițiale [C]

1. Deșurubați capacul bateriei.
2. Introduceți bateria aliniind contactele.
3. Dacă doriți, legați șnurul.
4. Dacă doriți, activați blocarea reglajelor.
5. Înșurubați capacul bateriei.

Reîncărcarea bateriei [D]

1. Deșurubați capacul bateriei.
2. Scoateți bateria.
3. Introduceți bateria în încărcătorul de baterii și conectați-l la priza de curent. Pentru încărcarea completă a bateriei sunt necesare 8/10 ore.
4. Scoateți bateria încărcată și introduceți-o în laringofon aliniind contactele.
5. Înșurubați capacul bateriei.

Instrucțiuni de folosire [E]

1. Plasați dispozitivul apăsând ușor și omogen pe partea cea mai moale a gâtului.
2. Apăsați butonul pentru a activa laringofonul și încercați vocea dispozitivului vocalizând literele **A - E - I - O - U**.
3. *În caz că ați activat blocarea reglajelor, glisați în jos până când reglajele sunt vizibile.*
4. Utilizați reglarea tonului **T** pentru a ajunge la tonul dorit.
5. Utilizați reglarea volumului **V** pentru a ajunge la nivelul dorit.
6. *În caz că ați activat blocarea reglajelor, glisați în sus până când reglajele sunt acoperite.*

Întreținere

Întreținerea trebuie să fie făcută de către distribuitor. Curățarea dispozitivului poate fi efectuată cât de des doriți, utilizând o cârpă și un pic de alcool sanitar.

Garanție

Dispozitivul Amplicord 55X împreună cu toate componentele sale are o garanție de doi ani (24 luni) de la data achiziționării, care acoperă defectele de material și de fabricație. Garanția constă în înlocuirea și/sau repararea gratuită a componentelor defecte. Garanția nu se aplică dacă aparatul a fost modificat, dacă defecțiunea provine din folosirea incorectă sau din căderea aparatului. Nu sunt incluse în garanție încărcătorul și bateria reîncărcabilă.

Dziękujemy za wybór nowego laryngofonu Amplicord 55X – to prostota i funkcjonalność w służbie Twojego głosu.

Zawartość opakowania [A]

- ❶ Amplicord 55X
- ❷ Zasilacz AC 220V 50Hz DC 9V 30mA
- ❸ Bateria wielokrotnego ładowania 8.4V 250mAh
- ❹ Pasek
- ❺ Pokrowiec
- ❻ Blokada regulacji
- ❼ Instrukcja dla użytkownika

Opis produktu [B]

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| ❶ Głowica | ❹ Regulator głośności V |
| ❷ Przycisk | ❺ Pokrywa komory baterii |
| ❸ Regulator tonu T | ❻ Mocowanie paska |

Przed uruchomieniem [C]

1. Odkręć pokrywę komory baterii.
2. Włóż baterię dopasowując styki.
3. Jeśli chcesz, możesz przypiąć pasek.
4. Jeśli chcesz, możesz założyć blokadę regulacji.
5. Przykręć pokrywę komory baterii.

Ładowanie baterii [D]

1. Odkręć pokrywę komory baterii.
2. Wyciągnij baterię.
3. Włóż baterię do ładowarki i podłącz ją do gniazdka elektrycznego. Całkowite naładowanie baterii wymaga około 8-10 godzin.
4. Wyciągnij naładowaną baterię i ponownie włóż ją do laryngofonu dopasowując odpowiednio styki.
5. Przykręć pokrywę komory baterii.

Instrukcja użytkowania [E]

1. Połóż urządzenie z lekkim i równym naciskiem w najbardziej miękkim miejscu szyi.
2. Naciśnij przycisk, aby uruchomić działanie laryngofonu i wypróbować głos urządzenia wypowiadając litery **A - E - I - O - U**.
3. *W przypadku gdy została założona blokada regulacji, przesun ją do dołu, aż zostaną odsłonięte regulatory.*
4. Użyj regulatora tonu **T**, aby osiągnąć pożądaną tonowość.
5. Użyj regulatora głośności **V**, aby osiągnąć pożądaną poziom głośności.
6. *W przypadku gdy została założona blokada regulacji, przesun ją do góry, aż regulatory zostaną zasłonięte.*

Konserwacja

Konserwacja musi być wykonywana u dystrybutora. Czyszczenie urządzenia może być przeprowadzane tak często, jak uznaje się to za potrzebne, przy użyciu tkaniny nasączonej alkoholem - rozcieńczalnikiem.

Gwarancja

Urządzenie Amplicord 55X jest objęte gwarancją na każdą część na okres dwóch lat (24 miesiące) od daty zakupu na wypadek jakiegokolwiek wady materiału lub wykonania. Gwarancja polega na wymianie i/lub naprawie wadliwych komponentów. Gwarancja wygasa jeśli urządzenie zostało naruszone, jeśli wada wynika z nieprawidłowego użytkowania lub upadku. Gwarancji nie podlegają zasilacz oraz bateria wielokrotnego ładowania.

İşlevselliği ve kullanım kolaylığıyla sesinizin hizmetindeki yeni gırtlak konuşma cihazı Amplicord 55X'i seçtiğiniz için teşekkürler.

Paketin içindekiler [A]

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ❶ Amplicord 55X | ❹ Askı |
| ❷ Güç kaynağı AC 220V 50Hz | ❺ Kılıf |
| DC 9V 30mA | ❻ Ayar kilidi |
| ❸ Şarj edilebilir 8.4V 250mAh pil | ❼ Kullanma kılavuzu |

Ürünün tanımı [B]

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ❶ Baş kısım | ❹ Ses ayarı V |
| ❷ Düğme | ❺ Pil kapağı |
| ❸ Ton ayarı T | ❻ Askı takma yeri |

Başlarken [C]

1. Pil kapağını sökünüz.
2. Pili bağlantı noktalarına göre yerleştiriniz.
3. İsteğe göre askıyı takınız.
4. İsteğe göre ayar kilidini takınız.
5. Pil kapağını tekrar vidalayınız.

Pilin şarj edilmesi [D]

1. Pil kapağını açınız.
2. Pili çıkartınız.
3. Pili şarj aletine yerleştiriniz ve aleti elektrik prizine takınız. Pilin tamamen şarj olması için 8/10 saat gereklidir.
4. Pili şarj aletinden alınız ve doğru bağlantı noktalarına temas edecek şekilde cihaza yerleştiriniz.
5. Pil kapağını kapatınız.

Kullanma talimatı [E]

1. Cihazı boynun en yumuşak yerine hafif ve eşit derecede baskı yaparak dayayınız.
2. Cihazı çalıştırmak için düğmeye basınız ve **A - E - I - O - U** seslerini çıkararak cihazın sesini deneyiniz.
3. *Ayar kilidi takılıysa, aşağıya doğru kaydırarak ayarlama düğmelerinin üzerini açınız.*
4. Arzu edilen tonu ayarlamak için **T** düğmesini kullanınız.
5. Arzu edilen ses seviyesini ayarlamak için **V** düğmesini kullanınız.
6. *Ayar kilidi takılıysa, düğmelerin üzerini örtmek için yukarıya doğru kaydırınız.*

Bakım

Bakımın dağıtımçı firma tarafından yapılması gerekmektedir. Cihazın temizliği az miktarda denatüre alkol dökülmüş bir bez yardımıyla arzu edilen sıklıkta yapılabilir.

Garanti

Amplicord 55X cihazı tüm parçalarıyla her tür malzeme ve üretim hatasına karşı satınalma tarihinden itibaren 2 yıl (24 ay) süreyle garanti altındadır. Garanti hatalı parçaların ücretsiz değiştirilmesi ve/veya onarılmasını kapsar. Cihazla oynanması ya da arızanın yanlış kullanım ve düşmeden kaynaklanması halinde garanti geçersiz olur. Güç kaynağı ve şarj edilebilir pil garanti kapsamı dışındadır.



Reg. n. 531
ISO 9001:2000



Amplicord di Gabriella Salvatore

Via Val Sillaro 10
00141 Roma RM
ITALIA

Tel. +39 06 88 63 372
Fax +39 06 88 63 285

info@amplicord.it
www.amplicord.it